


1. Description du système

Appareil de mesure de la glycémie Medi+Sure® multi(Revers)



Indicateur de glycémie pour multi-usagers

Appareil de mesure de la glycémie Medi+Sure® multi (arrière)

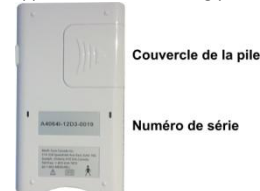

Bandelette de mesure de la glycémie Medi+Sure® multi



2. Installation / remplacement de la pile



1. Ouvrez le couvercle de la pile en poussant la languette.
2. Utilisez le couvercle de la pile pour sortir celle-ci de son logement.
3. Insérez une pile neuve, côté positif (+) vers le haut, et veillez à ce que la pile soit insérée sous le dispositif de retenue de la pile. Appuyez fermement sur la pile. Glissez le couvercle de la pile jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. La mention "Set" (réglez) sera affichée à l'écran ACL pendant environ une seconde.
5. Réinitialisez la date, l'heure et les unités.

3. Réglage de la date, de l'heure et l'unité de température




1. Appuyez sur le bouton "S" (bouton de réglage) pendant environ 3 secondes.
2. Vous entendrez un bip, et l'appareil de mesure s'allumera. L'écran ACL affichera la date, l'heure, l'unité de température, l'unité et le symbole du thermomètre () à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton "S" (bouton de réglage). L'année clignotera à l'écran.
4. Appuyez sur le bouton ">" (flèche de droite) ou le bouton "<" (flèche de gauche) jusqu'à ce que l'année exacte soit affichée.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton "S". Le mois clignotera à l'écran ACL.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour modifier la date, l'heure et l'unité de température que vous désirez afficher.

4. Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton "<" (flèche de gauche) pendant environ 3 secondes sur la face de l'appareil de mesure.
2. Un bip sonore retentira, et l'appareil se mettra en marche. AL 1 (alarme 1) et l'heure seront affichés à l'écran ACL.
3. Appuyez sur le bouton "S" (bouton de réglage) pour activer l'alarme, et le symbole () clignotera à l'écran. Vous pouvez activer (On) ou désactiver (Off) l'alarme en appuyant sur le bouton ">" ou "<".
4. Appuyez de nouveau sur le bouton "S", et l'heure clignotera à l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton ">" ou "<" jusqu'à ce que l'heure exacte soit affichée.
6. Appuyez sur le bouton "S". Les minutes clignoteront.
7. Appuyez sur le bouton ">" ou "<" jusqu'à ce que les minutes exactes soient affichées.
8. Appuyez sur le bouton "S", et l'appareil de mesure émettra un bip. La mention "ok". sera affichée à l'écran ACL. Le réglage de AL1 (Alarme 1) est terminé.
9. Appuyez sur le bouton "S" pour régler AL 2~4..
10. Appuyez sur le bouton "S" pendant 3 secondes, et l'appareil de mesure émettra un bip. L'appareil s'éteint lorsque la mention "SAVE" (sauvegarder) apparaît à l'écran. Tous les réglages sont sauvegardés.

5. Préparez le dispositif et le prélèvement lancing à usage unique de sang

1. Lavez-vous les mains dans l'eau chaude et savonneuse. Rincez bien et SÉCHEZ-les complètement. Vous pouvez également utiliser une garniture d'alcool pour nettoyer votre bout du doigt. Il est nécessaire de s'assurer que l'emplacement est SEC avant l'essai.
2. Retirez soigneusement le chapeau protecteur
3. Poussez le dispositif lancing à usage unique fermement sur l'emplacement choisi pour mettre le feu.
4. Ayez la PA de dispositif dans un récipient approprié de dièses.

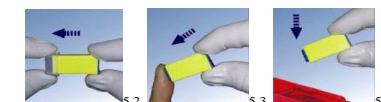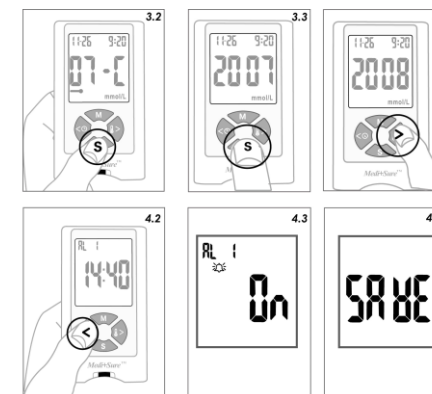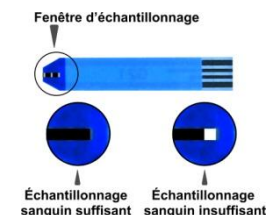

6. Mesure de votre glycémie

1. Le système de surveillance de glucose de sang Medi+Sure® multi est prévu pour l'usage dans la mesure quantitative du glucose dans le sang entier capillaire frais du doigt. Il peut être employé pour les patients multiples dans un arrangement professionnel de soins de santé
2. Préparez à l'usage unique lancette conformément au mode d'emploi.
3. Prenez une bande de mesure dans le flacon de bandes de mesure. Remettez le capuchon du flacon en place immédiatement, et fermez-le hermétiquement.
4. Insérez la bande de mesure (barres noires face à soi) dans la fente de la bande de mesure de l'appareil. Celui-ci se met en marche automatiquement. Assurez-vous que ce numéro correspond au code du flacon de bandes de mesure.
5. Lorsque le symbole de la goutte de sang clignote à l'écran, vous pouvez commencer le test. Vous avez 3 minutes pour appliquer l'échantillon de sang. Sinon, l'appareil s'éteint automatiquement.
6. Appuyez la lancette contre le bout de votre doigt et appuyez sur la gâchette. Pour aider une goutte de sang à se former, baissez votre main sous la taille et massez doucement le doigt, de la paume au bout du doigt.
7. Prenez l'appareil et procédez de la façon la plus confortable possible pour que la goutte de sang entre en contact avec le rebord du point d'application de la bande de mesure. Le sang sera attiré automatiquement dans la bande de mesure. Un bip sonore sera émis pour vous indiquer que le test est commencé.
8. Lorsque vous entendrez un bip, ce symbole (---) apparaîtra à l'écran. La séquence "--", "- " et "- " apparaîtra ensuite à l'écran. Suite au décompte, le résultat du test est affiché avec l'heure et la date, puis sauvegardé automatiquement dans la mémoire de l'appareil.
9. Inscrivez le résultat dans votre registre.
10. étirez la bande de mesure de l'appareil. Jetez la bande de mesure et la lancette usagées dans un contenant imperforable.
11. Le mètre devrait être essuyé avec le désinfectant approprié en suivant la section de « comment nettoyer votre dispositif » du guide de l'utilisateur après utilisation ou avant utilisation dans le prochain patient



S'il vous plaît lire l'Instruction d'appareil pour Usage avant le début